

iCue

智慧照護幫手

24小時，做您最佳後援


iTracker 使用說明



安裝前須知

請客戶先提供以下資訊

1.樓層平面圖 (照片)：標示主要空間與出入口。

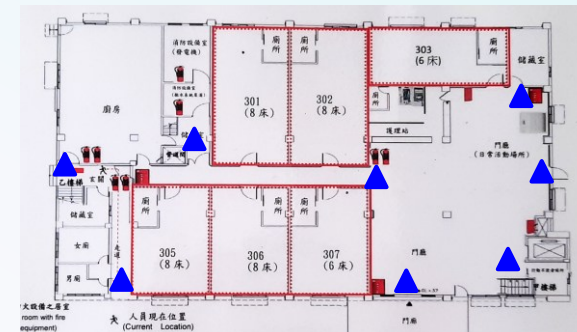

2.安裝位置照片/ 插座 (緊急照明燈) 位置照片



3.住民狀況：如行動能力、走失風險、常用活動區域。

4.Wi-Fi 可用性：透過手機連上Wi-Fi，測試是否可連線

安裝建議

1.預設建議安裝於以下安裝點：大門出入口、安全門、樓梯、電梯。

2.如有以下狀況需請客戶先行找弱電或網路協助廠商處理：
例如該位置附近無電源、高度太高安裝困難、該區無WIFI訊號無法覆蓋。


3. 安裝建議

電源：距離插座 $< 2\text{ m}$ 優先並避免放置於潮溼/滴水區。

通訊：Wi-Fi RSSI $> -65\text{ dBm}$ 佳 (> -75 可用)

干擾：如附近有金屬相關物品請盡量保持距離離 $30\text{--}50\text{ cm}$ 以上。

接收器網路設定

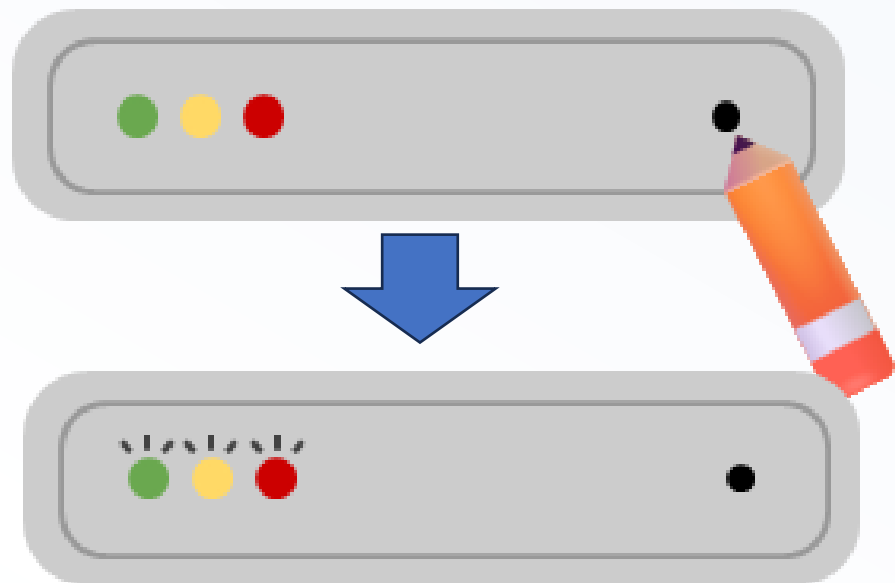

插上電後使用原子筆或迴紋針之類的尖物，按“網路重置按鈕”持續5秒後燈號會熄滅，放開按鈕後會持續閃爍，表示可以開始設定WiFi


手機開啟WiFi，連接
HUBC4D8D588B967 (接收器序號)



接收器網路設定

打開瀏覽器 連接192.168.4.1

輸入想連結的WiFi帳號及密碼，輸入完成後請按下“OK”，確認ssid與pwd輸入正確，再點選Back Main Page，最後點選Finish Settings

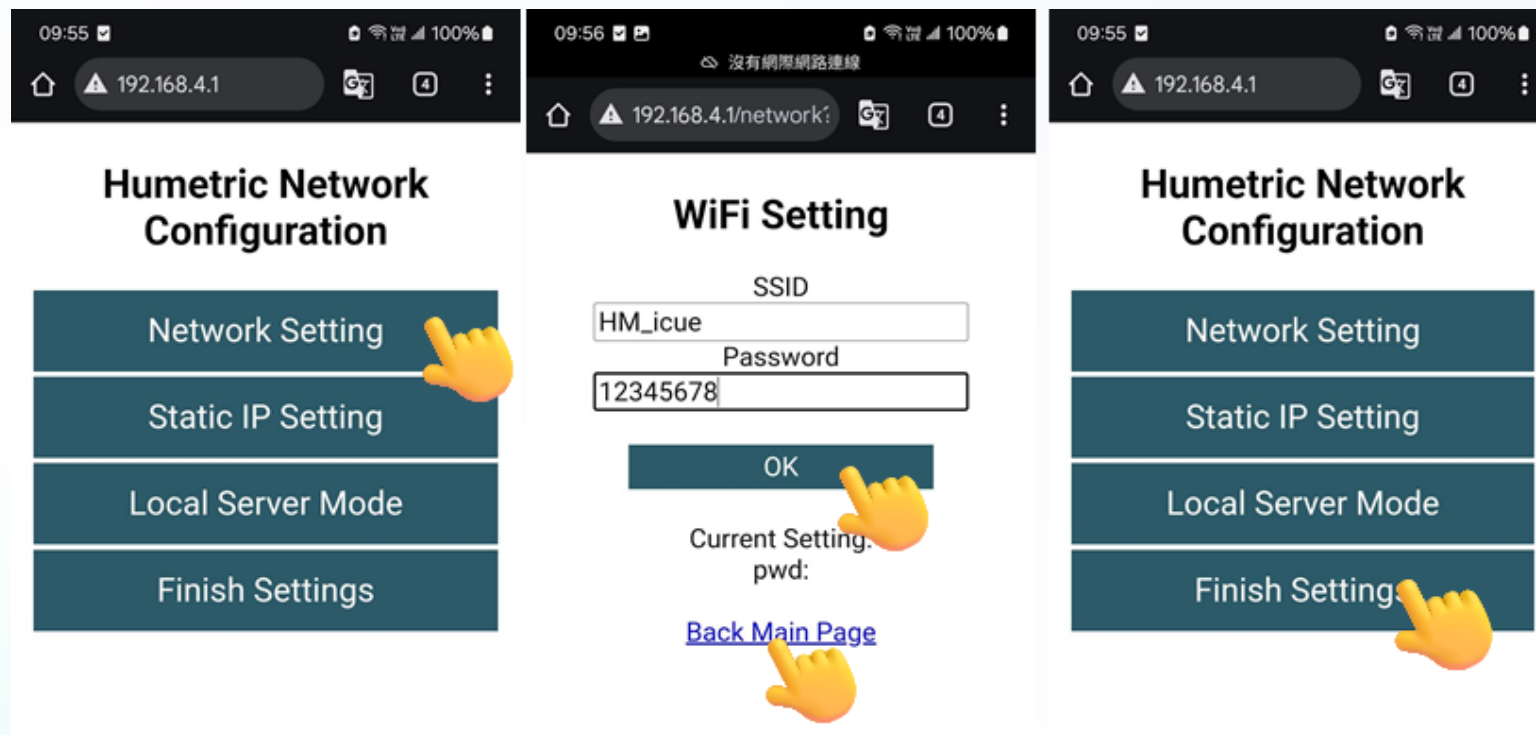


Hub設定



1

將Hub編號填入

2

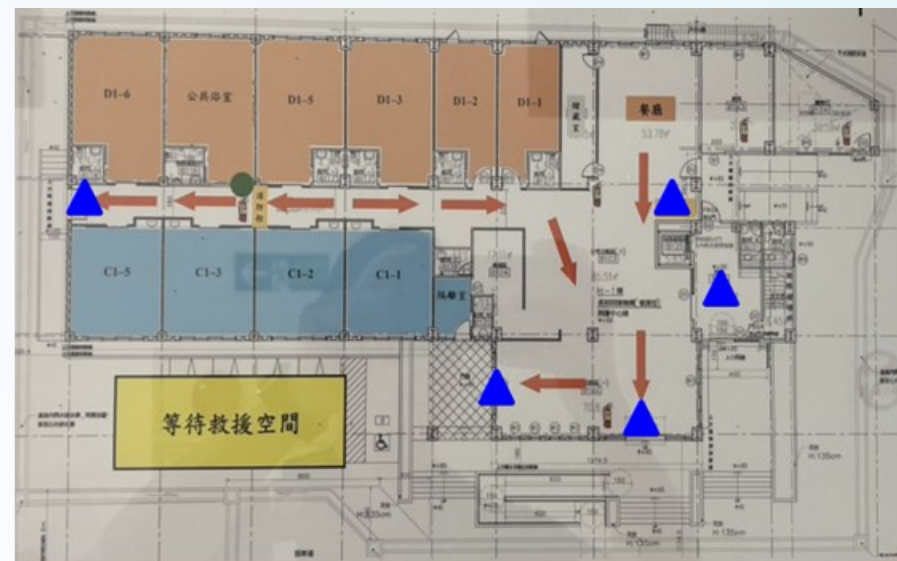

將現場Hub安裝位置名稱填入此欄
該名稱會顯示於line通報及語音通報的內容

編號	狀態	位置	警戒範圍	接近通知	超時通知	離開通知	開啟時間	關閉時間
HUBC4D8D588B97C			中 ▼	ON ▼	0	OFF ▼	0:00	23:59
HUBC4D8D588C028			中 ▼	ON ▼	0	OFF ▼	0:00	23:59
HUBC4D8D588BFF4			中 ▼	ON ▼	0	OFF ▼	0:00	23:59
HUBC4D8D588C074			中 ▼	ON ▼	0	OFF ▼	0:00	23:59
HUBC4D8D588C1E4			中 ▼	ON ▼	0	OFF ▼	0:00	23:59

Hub通知設定說明

1	2	3	4	5	6	7	8	
編號	狀態	位置	警戒範圍	接近通知	超時通知	離開通知	開啟時間	關閉時間
HUBC4D8D588C1B0		20樓大門	最小 ▾	ON ▾	0	OFF ▾	0:00	23:59
HUBC4D8D588C040		20樓實驗室	最小 ▾	ON ▾	0	OFF ▾	0:00	23:59
HUBC4D8D588CFD0		15樓DEMO1	最小 ▾	ON ▾	0	ON ▾	0:00	23:59

紅框內資料可直接更動

1. 接收器的完整編號
2. 接受器狀態：無顯示即離線，上線會顯示"上線"
3. 安裝位置 (通知的位置)
4. 發出通知的閾值(rssi)，最大~最小(-90 ~ -60dB)，高於設定就會發出通知
若須設定更低，也可直接輸入數字(例如-55)
5. 接近時會發出通知的開關
6. 停留時間高於設定時間會發出通知
7. 離開時會發出通知的開關
8. 自訂通報開關的時段，例如開18:00 關5:00，代表5:00~18:00關閉通知

iTracker設定



1
將iTracker
完整編號填入



2

此編號為完整編號後4碼
對應平安符及裝置上編號

iTracker	編號	顯示名稱	#F
FFFF11998710	8710	葉張春妹	☒
FFFF11A52C1F	2C1F	林江美玉	☒
FFFF11AAFA93	FA93	劉淑蘭	☒
FFFF11A4FA9D	FA9D	杜秀梅	☒
FFFF11A3FEE9	FEE9	陳素蓮	☒
FFFF11A69B06	9B06	林陳峰	☒
FFFF11AAB6C5	B6C5	陳登正	☒
FFFF1198F3ED	F3ED	陳煥勳	☒

3

將機構提供之住民名
稱填入

iTracker通知設定說明

1	2	3	4	5			
A	B	C	D	E	F	G	H
iTracker	最近一筆	位置	編號	顯示名稱	20樓大門	20樓實驗室	15樓DEMO1
FFFF11AF1AFC	2025-07-26 21:16:31		1AFC	iTracker	ON ▼	ON ▼	ON ▼
FFFF11A78AB8	2025-07-28 08:19:48		8AB8	輪椅奶奶	ON ▼	ON ▼	ON ▼
FFFF11AAFA54	2025-06-14 16:49:06		FA54	FA58	ON ▼	ON ▼	ON ▼

紅框內資料可直接更動
例如:更換住民、開關設定

1. iTracker的完整編號
2. 最近一筆收到資料的時間
3. 目前地點
4. iTracker的短編號 (貼於 iTracker上)
5. 接收器個別開關

更換使用住民

A1 fx iTracker

	A	B	C	D	E	F	G
1	iTracker	最近一筆	位置	編號	顯示名稱	大門	2F廁所
2	FFFF11998710	2025-08-20 16:14:26		8710	葉張春妹	ON	ON
3	FFFF11A52C1F	2025-08-20 16:14:16		2C1F	林江美玉	ON	ON
4	FFFF11AAFA93	2025-08-20 16:14:26		FA93	劉淑蘭	ON	ON
5	FFFF11A4FA9D	2025-08-20 16:14:23		FA9D	杜秀梅	ON	ON
6	FFFF11A3FEE9	2025-08-20 16:14:09		FEE9	陳素蓮	ON	ON

+ ≡ iTracker設定 接收器設定 <

Step1

選擇iTracker設定

Step2

確認iTracker編號




Step3

修改住民名稱

故障排除-斷線

iTracker 離線處理：

1. 長按按鈕確認是否可以開機

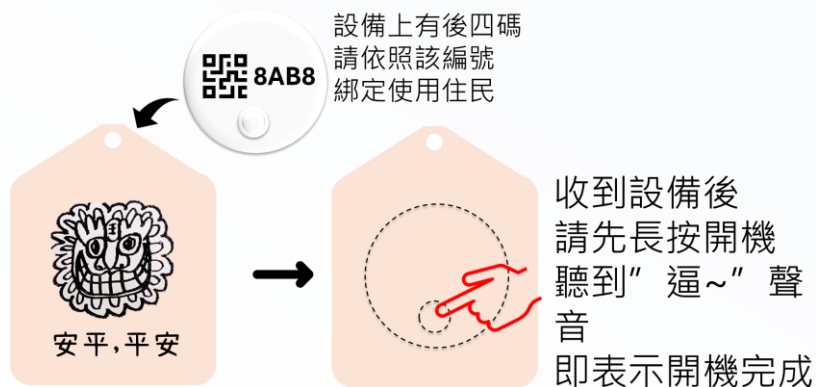


2. 無法開機請先更換電池



Step1 將iTracker從平安符中取出



Step2 從側邊凹槽，將iTracker
打開

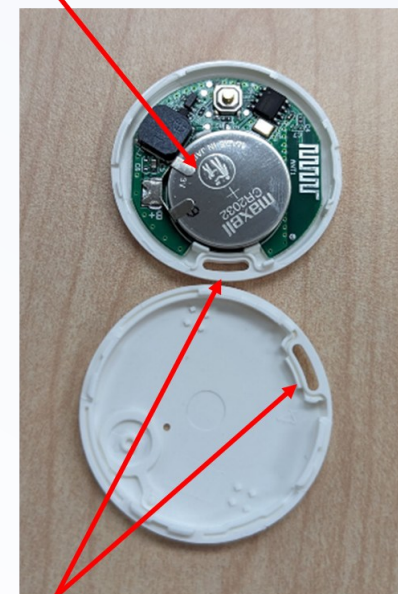

Step3 將CR2032電池拿出替換

Step4 裝回時孔洞對齊孔洞
且注意按鈕扣上

iCue

智慧照護幫手

24小時，做您最佳後援



如還有其他問題
歡迎聯繫iCue客服
我們會線上協助您



Line ID : icuecare

